



*Tonino Lamborghini*

ALPHA·ONE

instruction manual

每一次的使用,都会有真实的感受。  
自己是美丽的  
而且,要是与众不同的。

我们要的不仅仅是漂亮的肌肤,更是要达到能散发出压倒性存在感的肌肤。

要到达这样的境界,必须是可以让让自己满足的,

同时是让人心动的美容方法。

ALPHA·ONE本着「尽善尽美的功能性」及「可以带给您多姿多彩的快乐感」




的信念,不仅仅是一个「装饰」更重要的可以提供「保养」的作用。

诚挚感谢您购买「ALPHA·ONE」美容器,为了让您以更好的,更安全的使用本产品,请务必在使用产品前,详细阅读本说明书并正确使用产品。  
为了后边有需要时可以马上阅读请妥善保管本说明书。同时本说明书上附有产品的保证书(保修卡)所以请务必妥善保管,切勿遗失本说明书。



1. 前言.....1
2. 警告及安全注意事项.....2~5
3. 各部位名称及附属品.....6
4. 充电方式.....7
5. 充电通知技能.....7
6. 使用上的注意事项.....8
7. 使用后的保养方法.....8
8. 操作说明.....9
9. 输出特点.....9
10. 各个模式的具体内容.....10
11. 美容器的使用要点.....11
12. 有困难的时候.....12~13
13. 保修规定.....14
14. 产品规格明细.....14
15. 保证书(保修卡).....15


## 警告及安全注意事项

错误地使用本产品很大可能会造成对人身体的危害及财产的损失。所以请务必在确认一下注意事项后正确的使用本产品。


-  **危险** 如果使用不当,极有可能导致死亡或重伤的危险情况发生。
-  **警告** 如果使用不当,有可能导致死亡或重伤的情况发生。
-  **注意** 如果使用不当,极有可能导致重伤或物品损坏的情况发生。

图标表示例

	本记号为告知「禁止行为」的内容标识
	本记号为告知「强行或指示行为」的内容标识

 <b>危险</b>	
	<p>使用以下医用电子设备的人士请勿使用本产品。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 心脏起搏器等体内植入型医用电子设备</li> <li>● 人工心肺等用来维持生命体征的医用电子设备</li> <li>● 心电图数据记录等穿戴式医用电子设备</li> </ul> <p>→可能会导致以上医用电子设备的错误操作</p>

## 警告

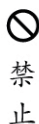

■接受医师治疗中的客人或是下记人群,必须经过医生同意才可以  
使用本产品。

- 有心脏障碍,患有心脏疾病的人士
- 有急性疾病/发热性疾病/感染性疾病/结核性疾病的人士
- 有面部神经痛的人士
- 有面部黑皮症的人士
- 怀孕中的孕妇及刚生产完的产妇
- 疤痕体质的人士
- 过敏体质的人士
- 其他身体不好的人士(发烧超过38°C以上的情况,血压异常的情况,有头痛的情况下)
- 皮肤有异常的情况


【患有特应性皮炎人士,过敏体质特别是肌肤敏感的人士·因化妆品而引起皮肤炎症的人士·因为  
痤疮(粉刺)引起炎症的人士·有湿斑或热斑或病态斑(因内脏疾病引起的)的人士】

- 长期使用类固醇激素或因肝功能障碍引起毛细血管扩张的人士
- 血友病患者
- 饮酒或长期服药的人士
- 需要安静环境(静养)的人士
- 有痛觉,知觉障碍(麻痹)的患者
- 幼儿及自身无法做出判断的人士
- 患有恶性肿瘤的患者
- 有血压异常的患者

■下记部位请勿使用。可能会引起意外或肌肤,身体,头皮及毛发等  
的问题发生。

- 眼球部分(上眼皮部)
- 伤口
- 心脏附近,私密处
- 口腔内等黏膜部位
- 刚做完脱毛·剃毛等部位
- 生理中(例假期)的腹部
- 体内植入了金属或塑料,硅胶等的部位
- 因化妆品等引起肌肤炎症的部位
- 因暖宝(热敷)或过度日晒等引起炎症的部位
- 有瘙痒或热斑,及物理性刺激等发生病态斑的部位
- 喉结周围上下左右5cm范围内
- 膝盖前边(膝盖)·小腿·手肘·脚踝等关节部位

## 警告

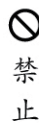

- ※ 请避免给幼儿使用本机器
- ※ 在通院,服药中的人士请和自己的负责医生确认后再使用本产品
- ※ 因为有可能会引起身体不适,所以遇到一下情况请立刻终止使用本产品,  
同时请与医生咨询。
  - 身体感到异常不舒服,感觉到疼痛,及皮肤有发红,起疹等异常
  - 使用时除以上症状外的其他使用时的异常情况出现
  - 其他关于使用上有所顾虑的人士

### ■使用前的注意事项

- ① 请勿用于美容以外的目的
- ② 长时间不使用的情况下,再次使用前请务必再次阅读本说明书,  
同时使用前请确认电源,电线等是否有损坏,机器是否可以正常使用。

### ■使用中的注意事项

- ① 感觉到机器本体发生异常(有发热,有焦糊味道等)请立即关闭电源停止使用产品。
- ② 请勿一直充电放在一边不管
- ③ 请勿与其他电器产品同时使用,或是在不要在其他电器边上使用
- ④ 请勿在易燃物品(酒精,稀释液,除光液,苯,喷雾等物品)附近使用本产品

### ■使用后的保管及移动机器时的注意事项

- ① 使用后请务必关掉电源
- ② 为保证下次可以正常使用,请在使用后保持产品的清洁,  
请勿在高温高湿的地方保管存放本产品
- ③ 请勿长时间放置在阳光直射的地方,请勿放在热源附近。
- ④ 请定期对产品进行清洁,检点,以保证产品的卫生及正常使用。
- ⑤ 开车时请勿使用本产品。
- ⑥ 处理废弃本产品时,请根据所在地的垃圾投放规定处理。

### ■机器的故障及操作上的注意事项

- ① 请勿自行改造产品
- ② 请使用专配的附属品
- ③ 如机器出现故障,请联系销售店铺或生产厂家
- ④ 请避免产品本体及电源等从高出落下,或是上边放重物,或是强烈撞击产品
- ⑤ 请勿将产品投入火中

## ⚠ 注意

### ! 请务必遵守


- 请遵守使用说明书标明的使用时间及使用频度。
- 最开始使用时,在不习惯的情况下请缩短使用时间。
- 请勿在浴室等水气大的地方,容易泼上水的地方的使用,因为这样容易引起触电等危险,请尽量避免这些地方。
- 使用本品时,请务必将随身携带的金属类产品(项链,耳钉,耳环,眼镜,手表等)取掉。
- 电源与本体链接时,如发生停电等情况,请马上停止使用产品,并关闭产品电源,同时请将电源拔掉。如果不拔掉电源,再次来电时,可能会引起机器故障
- 在拔掉电源的时候,请正确操作。切勿用力拉拽电线及接头部位。同时,切勿拉拽,极端曲折电线。
- 请勿用吹风机或是风扇加热器来烘干机器。
- 本品采用的是日本国内的基准,所以不对应其他国家的产品的基准。请一定要使用 100 V 的交流电压。本品在日本以外的地区使用时,出现任何故障本公司不承担相应责任。请知悉。
- 充电时请务必使用产品配备的专用电源。
- 请避免在有磁场或是电波不稳定的场所使用本产品。
- 请放在幼儿够不到的地方保管。请避免儿童幼儿接触或使用本产品,可能会导致烧伤,触电,火灾的事故发生。

## 各部位名称及附属品

### ● 本体



### ● 充电座

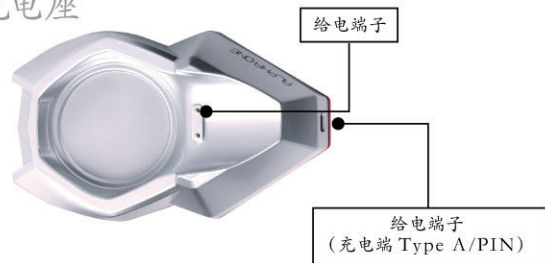

### ● 附属品



## 充电方法

本产品为充电式产品。  
购买后第一次使用时,请务必先进行充电。

※机器本体的充电电压为 12 V,所以不能使用电脑等(5 V)来充电。  
充电时,请务必使用产品自带的 12 V 专用附属电源。

### ● 使用充电座充电

- 将充电座用电源 (Type A/C) 的端口与充电座链接
- 另一端与专用 AC 插头链接
- 将机器本体放在专用充电座上
- ※请确认各电源端口是否正确插入对应接口
- ※再拔掉电源端口时,请拿着树脂模端口拔出电源端口
- ※充电座请放在坚固水平的桌子等地方。



### ● 直接从机器本体充电

- 将本体直接用电源 (Type A/PIN) 的端口与机器本体链接。(端口为磁性吸着方式的接口, 端口接续时有正负极之分, 所以接续时请注意正确的吸着方向)
- Type A 端口接入插头处, 另一端与 AC 插座头链接
- ※请将机器放在再安定的地方充电。



## 使用上的注意

- 请在卸妆, 洁面后干净的肌肤状态下使用本产品。  
在毛孔中有皮脂及杂菌等不卫生的肌肤状态下使用产品, 可能会引起肌肤出现粉刺, 脓包等肌肤问题。
- 需要护理的部位, 请在涂抹化妆水, 凝胶(美容液)等产品后使用机器  
因为在肌肤不湿润的情况下机器不会通电, 这样不会达到预定的效果。
- 使用频度, 因模式不同而有所差异。  
自动模式(AUOT MODE)可以每天使用。  
手动模式(MANUAL MODE)根据组合模式及护理的不同, 建议一周使用 2 ~ 3 次。  
使用时请仔细确认肌肤状态, 切勿勉强使用。
- 强度档次, 请从最低档开始, 习惯后再慢慢加强档次。  
如果使用时因电流刺激感到肌肤不适或刺痛, 不要勉强继续使用, 可以选择比较弱的档次。  
在习惯了电流刺激感, 在一点点的调节强度。
- 护理时, 请不要将电极面用力强压与面部或头皮处。  
使用时, 让电极面紧贴肌肤表面, 轻轻按住机体使其紧贴肌肤进行护理。  
强行按压并进行肌肤护理, 会增加肌肤负担, 很可能导致皮下充血或受伤。
- 护理时, 请避开肌肤有炎症等的部位。  
使用时请避开肌肤有发红, 瘙痒, 刺痛等炎症的部位。  
同时如果使用中, 肌肤有发红或灼热等违和感, 请停止使用。
- 使用产品后, 请做好化妆水, 美容液等最基本的护肤护理。  
使用机器护理完肌肤后, 肌肤表面残留的凝胶可以擦掉或等其渗透肌肤后在做基本的肌肤护理。

## 使用后的机器维护方法

- 使用后请按下列顺序对机器进行维护保养。※严禁水洗。
- 使用后请确认机器本体上是否残留有化妆水或水分,  
如果有残留请用柔软干净布子擦干净。
- 在擦拭机器时, 请勿使用酒精或洗涤剂。这些可能会引起机器本体的变形, 裂伤, 也可导致机器上的印刷或涂漆等出现掉色变色等情况。

## 充电通知功能

- 电池残量少少的情况下, 作为机器自带的【充电通知功能】、强度档次 LED 会在关机 OFF 时, 5 个灯同时点灯, 并发出 5 秒 [哔哔哔...] 的鸣响。  
之后, 会有 3 秒的 [哔] 声鸣响, 其后机器会自动关机。  
出现以上情况, 就可以进行充电了。

## 操作说明

### ● P/M 键

长按此键可以打开电源(ON),再次长按此键关闭电源(OFF)。

开电源后,短压此键可以进行 M1→M2→M3→M4→A 的模式转换。

M1 显示黄色灯    M4 显示橙色灯  
M2 显示红色灯    A 七彩多色灯  
M3 显示青色灯

### ● H/ 开始键

提高输出强度时使用。


在使用的模式下点击H键,强度等级1档亮灯,开始运作。

提高输出按H键调节,每按一次提升1档,出力强度共分5档。

### ● L 键

降低输出强度时使用。

降低输出强度按L键调节,每按一次降低1档,最低为1档

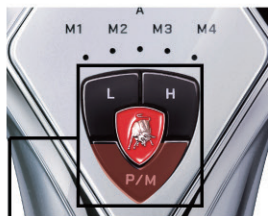

#### P/M 按键

电源的开(ON)/关(OFF)(长按)  
短按可选择各个模式。

#### H 按键

各个模式的开始(初始设定为模式1)  
提高输出强度时使用

#### L 按键

降低输出强度时使用

## 各模式内容

### ● M1(模式1:前期护理准备•5分钟)

- 按 P/M 键选择 M1 模式,然后点击 H 键开始模式 1 的运作。
- 输出超声波,RF及微电流。同时LED亮黄色灯。
- 机器运行中,可通过 H 键及 L 键调节输出强度。
- 机器运行中,会每隔 5 秒发出提示音[哔哔...]声,请根据提示音移动变化护理位置。
- 发出[哔哔,哔哔,哔-]的声音后,机器自动关机。

### ● M2(模式2:锻炼表情肌•5分钟)

- 按 P/M 键选择 M2 模式,然后点击 H 键开始模式 2 的运作。
- 输出超声波,RF及EMS。同时LED亮红色灯。
- 机器运行中,可通过 H 键及 L 键调节输出强度。
- 机器运行中,会每隔 5 秒发出提示音[哔哔...]声,请根据提示音移动变化护理位置。
- 发出[哔哔,哔哔,哔-]的声音后,机器自动关机。

### ● M3(模式3:形状记忆•5分钟)

- 按 P/M 键选择 M3 模式,然后点击 H 键开始模式 3 的运作。
- 输出超声波及负离子。同时LED亮蓝色灯。
- 机器运行中,可通过 H 键及 L 键调节输出强度。
- 机器运行中,会每隔 5 秒发出提示音[哔哔...]声,请根据提示音移动变化护理位置。
- 发出[哔哔,哔哔,哔-]的声音后,机器自动关机。

### ● M4(模式4:眼部护理•3分钟)

- 按 P/M 键选择 M4 模式,然后点击 H 键开始模式 4 的运作。
- 输出微电流。同时LED亮橙色灯。
- 机器运行中,可通过 H 键及 L 键调节输出强度。
- 机器运行中,会每隔 5 秒发出提示音[哔哔...]声,请根据提示音移动变化护理位置。
- 发出[哔哔,哔哔,哔-]的声音后,机器自动关机。


### ● A(自动模式•7分钟)

- 按 P/M 键选择 A 模式,然后点击 H 键开始自动模式的运作。
- 自动模式下,会按 M1→M2→M3 的顺序运行各个模式。
- 各模式切换时,机器会发出[哔-]的提示音,10 秒后进入下一个模式。配合各个模式,在运行对应模式时,【A】文字的地方点灯会依次按黄色→红色→蓝色变化显示。[哔-]声静止 10 秒后会发出[哔-,哔哔,哔-]的鸣声。
- 机器运行中,可通过 H 键及 L 键调节输出强度。
- 机器运行中,会每隔 5 秒发出提示音[哔哔...]声,请根据提示音移动变化护理位置。
- 发出[哔哔,哔哔,哔-]的声音后,机器自动关机。

※机器运行中按【P/M 键】,可直接变换运行模式。

变换运行模式后,会进到初始状态,需要按【H】键重新开始运行。

## 输出特点 (POINT)

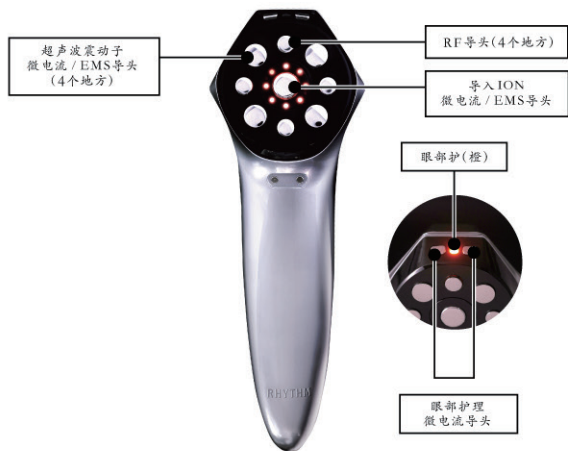


## 美容仪的正确使用方式

▲ 使用时,请勿用力压产品,只要保证电极面紧贴肌肤即可,无需用力。

(切勿用力按压。)

- ① 脖颈线
  - 从耳根后边慢慢沿脖颈线移动
- ② 面部轮廓
  - 从下巴前到耳根,沿着面部轮廓慢慢移动
- ③ 脸颊线
  - 由嘴角到耳中央,小鼻到太阳穴的方向慢慢移动
- ④ 睫毛上,额头线
  - 额头中央到太阳穴的方向,慢慢移动
- ⑤ 眼部周围
  - 由眼下向着眼尾的方向,慢慢移动

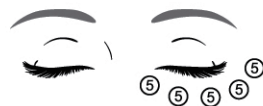

### 【注意事项】

- 请避开在有问题的部位(炎症,伤口等)使用
- 请勿在同一个地方使用5秒以上
- 如果使用中感到烫,刺痛感等情况,请停止使用。

※ 请准备号化妆水或凝胶(美容液等)

推荐的产品: v i-tenuto TUNING LOTION 120ml(化妆水)  
v i-tenuto LUXIST SERUM 120ml(美容液)

具体详细内容请上以下网址查询(日文网站)或扫码链接  
<https://alpha-one-shop.com/>



## 出现问题时的对应

本产品在使用中,如出现一下问题时,在确认起出现的原因下,请按照对应的处置方式来对应。

状态	为何出现此问题	对应方法
无法充电	AC 插头部分是否插到电源处。	▶ 请确认 AC 插头有正确的插入电源部位。
	充电座的 AC 插头部分是否插到电源处。	▶ 请确认 AC 插头有正确的插入电源部位。
	充电电池的自身消耗。	▶ 电池的寿命到头了。
即使充满电,使用时间还是很短	充电电池的自身消耗。	▶ 电池的寿命到头了。
EMS 的电流刺激几乎感觉不到(感觉很弱)	肌肤表面水分不够。	▶ 请涂抹足够的护肤品,保持肌肤足够湿润。
	EMS 的输出强度过低。	▶ 点击 H 键提高 EMS 的强度。
	电极面没有很好的贴合肌肤。	▶ 请将电极面与肌肤紧密接触。
	体感因人而异。	
EMS 的电流刺激感觉到疼痛(感觉很强)	电极面没有很好的贴合肌肤。	▶ 请将电极面与肌肤紧密接触。
	EMS 的电流出力等级太高。	▶ 请调节 L 键,降低出力等级。请不要无理过度使用本产品。
使用中,肌肤感觉紧绷	肌肤表面缺少水分,或是肌肤过于干燥。	▶ 涂抹足够的护肤品后使用,一定要足够的保湿。症状严重时,请停止使用本产品。
使用中,肌肤发红	持续作用在同一个部位。	▶ 请不要将电极面在同一个地方持续使用。使用时请务必在肌肤表面慢慢移动式使用,如果发红的很厉害的时候请马上停止使用产品。

## 出现问题时的对应

本产品在使用中,如出现一下问题时,在确认起出现的原因下,请按照对应的处置方式来对应。

状 态	为何出现此问题	对应方法
使用中,肌肤有灼热感	持续作用在同一个部位。	请不要将电极面放在同一个位置持续使用。使用时请务必在肌肤表面慢慢移动式使用。如果被使用位置出现发红很严重的情况,请马上停止使用产品。
使用中,电源自动关闭	开启了自动关闭功能。 (肌肤感知功能失调)	经过一定时间后机器会自动关闭电源。 再次长按 P/M 键,可以重新打开电源。
	启动了防止温度异常的功能。	为了安全起见,本产品搭载了自动关机功能。以防止机器在运作时温度过高引起对身体的伤害。如需再次使用,请静置一段时间后,待机器冷却后长按 P/M 键,可重新打开电源。
	需要充电了。	请再次充电后使用。

## 保证规定

### 保证规定

- 按照使用说明书的正常使用的情况下,在保修期间内发生故障时,我们将无偿修理。  
※申请无偿修理的情况下,请向销售店出示产品和保修卡。  
※如果是邮寄发送的情况下,运费是由客人负担的,请知悉。
  - 即便在保修期间内,以下情况原则上是有偿修理的,请注意。
    - 由说明书以外的错误操作引起的故障和损伤。
    - 不当的修理和改造导致引起的故障和损伤。
    - 购买后因运输,坠落等引起的故障及损伤。
    - 没有出示保修书的情况
    - 保修书上没有填写购买年月日,客户姓名,住址等信息,或者字句被修改的情况。
    - 搭载在车辆,船舶等上时发生的故障和损伤。
    - 因火灾,地震,水灾,雷击等天灾地变,异常电压,使用指定以外的电源(电压,频率)等引起的故障和损伤。
    - 在本公司以外的地方进行错误的修理或改造而产生的故障及损伤。
    - 故障原因非本产品引起的情况。
  - 本保修书只在日本国内有效。
  - 保修书不会再发行,请妥善保管。
- 保修卡是在本书明示的期间,条件下约定的免费修理。因此,本保修书并没有限制户的权利。关于经过保修期后的修理有什么不明白的地方,请咨询销售店。  
为了维持产品的功能,必要零件的最低保有期限是生产结束后5年。  
持有期间结束后,保养对应也随之结束。

## 产品规格

本 机			
材 质	ABS,SUS,其他	输出调整	5个阶段
重 量	约243g	消费电量	约5.6W(超声波+RF),约3.5W(充电时)
外 形	长214×宽74×高80(mm)	使用电池	锂离子电池 7.4V 1100mAh
充电器		电源适配器	
材 质	ABS,其他	入 力	AC100V~240V 50/60Hz
重 量	约238g	出 力	DC12V 0.5A
外 形	长158×宽91×高41(mm)		